


ASP Japanは感染管理のプロフェッショナルとして、あらゆる滅菌法における世界基準の包括的な滅菌モニタリングソリューションを提供することにより、滅菌保証の質向上、業務効率改善に貢献します。

VERISURE™

ボウイー・ディック テストパック-US
Steam Type 2

製品番号 #73180

FDA準拠
ISO11140-1
ISO11140-5

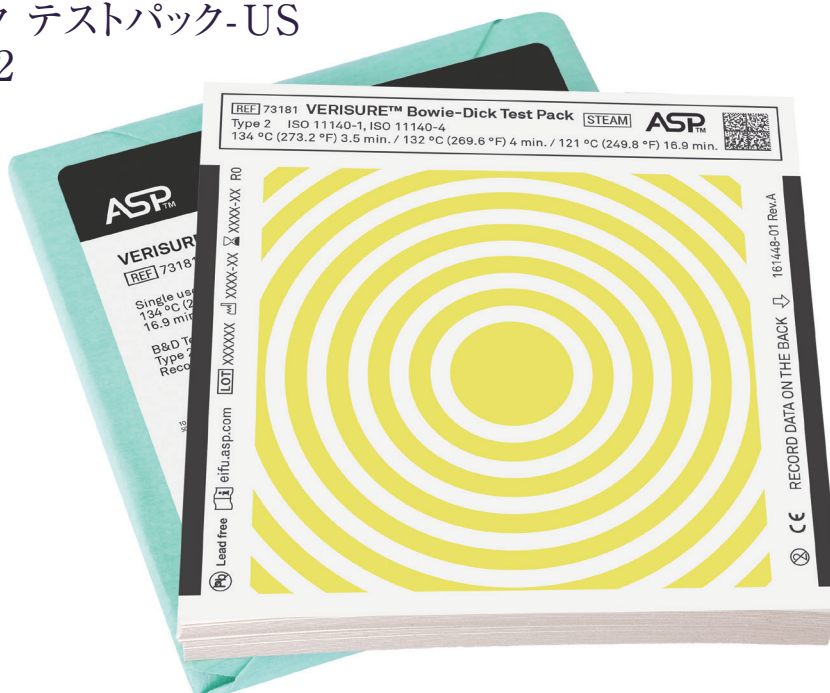

滅菌プロセスのモニタリングに信頼と安心感を提供

VERISURE™ ボウイー・ディック テストパック-USは、プレバキューム式高圧蒸気滅菌の滅菌サイクル初期段階で空気除去の有効性を評価できるディスポーザブルツールです。

プライマリー（一次）シートがテストシートとして包装されており、空気除去の有効性を評価するタイプ2のケミカルインディケーターです。テスト処理後に黄色から暗褐色/黒色に変わります。また、パックのラベルには処理の有無を判断するためにタイプ1のケミカルインディケーターが印刷されています。

さらに、パックの中にはワーニング（警告）シートもあり、テストシートよりも早期に滅菌器の故障の可能性を検出できます。

ケミカルインディケーター

● 不合格
● 合格

滅菌サイクル：
132℃で4分間
134℃で3.5分間

ワーニング（警告）シート

● 不合格
● 合格

プライマリー（一次）シート

● 不合格
● 合格